

1	CHC screw M8 L60	V02-860
2	Lock washer Ø 8	V22-8
3	Flat washer Ø 8	V20I-81815

Restriction on use / Precautions for use

Tightening torques (use key (Ref. : ZOC102))

Screw	Torques (Nm)
V02-860	15

- ↪ Assemble the screws using normal (Ref. : Z31-243) locking compound
- ↪ The product must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the patient concerned
- ↪ Product maintenance is subject to an assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the conditions of use
- ↪ All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel

Cleaning / Storage

- ↪ Stock the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
- ↪ The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the ortho-prosthetist depending on the patient concerned

Guarantee

The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in accordance with the manufacturer's instructions.

N.B. In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in, incomplete forms cannot be dealt with.

EC markings

Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.

Groupe G2M

168 ZA des Aubrières - 49412 SAUMUR Cedex (FRANCE)

Tél. : +33 (0)2 41 50 50 91 - Fax : +33 0(2) 41 83 05 82 - E-mail : info@groupe-g2m.com
www.groupe-g2m.com

Gamme
Enfant



Désignation

Adaptateur malléolaire en alliage léger avec pyramide - Vis M8

- ↪ Poids : 50 g

Destination

Élément de structure entrant dans la fabrication de prothèses endosquelettiques du membre inférieur


- ↪ Limite de poids : 50 kg

Compatibilités


- ↪ Adaptateurs de la gamme **Enfant**

Mise en place

Alignements théoriques

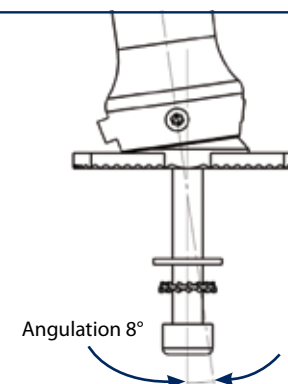

Angulation 8°

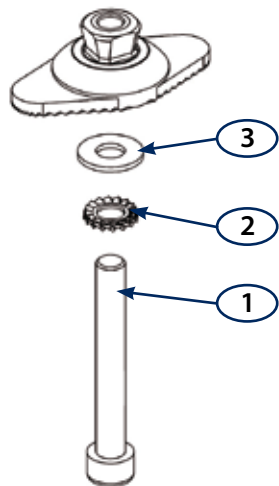

1	Vis CHC M8 L60	V02-860
2	Rondelle éventail Ø 8	V22-8
3	Rondelle plate Ø 8	V20I-81815

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

Couple de serrage (utiliser la clé dynamométrique (Réf. : ZOC102))

Vis	Couple (Nm)
V02-860	15

- ↪ Monter les vis avec du frein filet normal (Réf. : Z31-243)
- ↪ L'adaptateur doit être utilisé dans les limites de poids conseillées et suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ↪ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ↪ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Entretien / Stockage

- ↪ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ↪ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.

Child
Range



Designation

Light alloy malleolar adapter with pyramid

- ↪ Weight : 50 g

Purpose

Structural element used to make endoskeletal prostheses of the lower limbs

- ↪ Weight limit : 50 kg

Compatibility

- ↪ All the adapters in the *Child* range

Fitting

Theoretical alignments

