

## Fitting

- Grease these contacts area (Réf. : Z10)
- Put nut lock glue (Réf. : Z31-243) on the ranging screw, cut it down the joint cap


To optimize your assembly work, we recommend using these parts in conjunction with other parts of the same class in the JANTON range.

## Adjustments

When making the orthosis, it is highly advisable to optimize joint alignment to reduce wear of the contact surfaces.

**NOTE :** Control joint parallelism in order to reduce wear of surfaces in contact.

## Spares parts

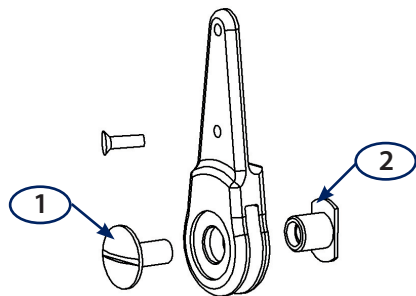

		L14	L15	L16
1	Screw	V0013	V0016	V0016
2	Joint cap	V0012	V0015	V0015

## Restriction on use / Precautions for use

- Do not heat the joints
- The product must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the patient concerned
- Product maintenance is subject to an assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the conditions of use
- All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel

## Cleaning / Storage

- Stock the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
- The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the ortho-prosthetist depending on the patient concerned

## Guarantee

The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in accordance with the manufacturer's instructions.

*N.B. In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in, incomplete forms cannot be dealt with.*

## EC markings

Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.

**Groupe G2M**

168 ZA des Aubrières - 49412 SAUMUR Cedex (FRANCE)

Tél. : +33 (0)2 41 50 50 91 - Fax : +33 (0)2 41 83 05 82 - E-mail : info@groupe-g2m.com

www.groupe-g2m.com

**Janton**

NOTICE TECHNIQUE D'INSTRUCTION

L14/L15/L16



## Désignation

Articulation de cheville à chape pour orthèse du membre inférieur.

- L14 : Série forte Acier inoxydable Poids : 320 g
- L15 : Série légère Acier inoxydable Poids : 200 g
- L16 : Série enfant Acier inoxydable Poids : 135 g

Les articulations sont livrées avec 4 rivets (Réf. : V18310).

## Destination

Articulation de cheville entrant dans la fabrication d'orthèses du membre inférieur.

## Compatibilités

- L14 : Section de montant 20 x 5 mm  
Etriers : L47, L50, L53, L56, L59, L62
- L15 : Section de montant 18 x 4 mm  
Etriers : L48, L51, L54, L57, L60, L63
- L16 : Section de montant 16 x 4 mm  
Etriers : L49, L52, L55, L58, L61, L64

## Mise en place


- Graisser les surfaces en contact (Réf. : Z10)
- Mettre du frein filet (Réf. : Z31-243) sur la vis, la couper au ras du culot

Afin d'optimiser vos montages, nous vous recommandons d'utiliser ces pièces en combinaison avec celles de la gamme Janton de même série.

## Réglages

Lors de la fabrication de l'orthèse, il est fortement conseillé d'optimiser le dégauchi des articulations afin de diminuer l'usure des surfaces de contact.

## Pièces détachées

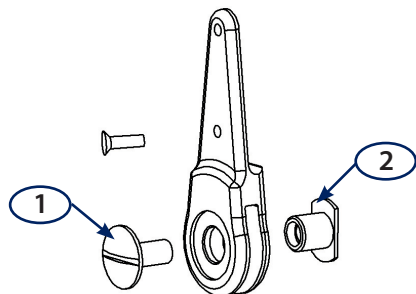

		L14	L15	L16
1	Vis	V0013	V0016	V0016
2	Culot	V0012	V0015	V0015

## Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- Ne pas chauffer les articulations
- L'articulation doit être utilisée dans les limites de poids conseillées et suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

## Entretien / Stockage

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

## Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

*NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.*

## Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.



## Designation

Cap ankle joint for lower limb orthosis.

- |                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| ➤ L14 : Strong set | Stainless steel | Weight : 109 g |
| ➤ L15 : Light set  | Stainless steel | Weight : 88 g  |
| ➤ L16 : Child set  | Stainless steel | Weight : 77 g  |

Ankles sold by 4 rivets (Ref. : V18310).

## Purpose

Ankle joint for use in lower limb orthosis.

## Compatibility

- L14 : Rod cross-section 20 x 5 mm  
Stirrups : L47, L50, L53, L56, L59, L62
- L15 : Rod cross-section 18 x 4 mm  
Stirrups : L48, L51, L54, L57, L60, L63
- L16 : Rod cross-section 16 x 4 mm  
Stirrups : L49, L52, L55, L58, L61, L64