

## Composition

1 hip parts.

## Spares parts

	N33	N34	N35
Lock	N3009	N3109	N3209
Ball bearing	V0024	V0024	V0024
Screws	V0153 V03606	V0109 V03606	V0107 V03606
Bearing	V407196	V405165	V405134
Springs	YRC0548	YRC0548	YRC0548

## Restriction on use / Precautions for use

- ↪ The product must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the patient concerned
- ↪ Product maintenance is subject to an assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the conditions of use
- ↪ All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel
- ↪ Heat the part with a blowtorch before modifying its shape (any cold shaping will nullify the guarantee)

## Cleaning / Storage

- ↪ Stock the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
- ↪ The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the ortho-prosthetist depending on the patient concerned


## Guarantee

The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in accordance with the manufacturer's instructions.

*N.B. In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in, incomplete forms cannot be dealt with.*

## EC markings

Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.

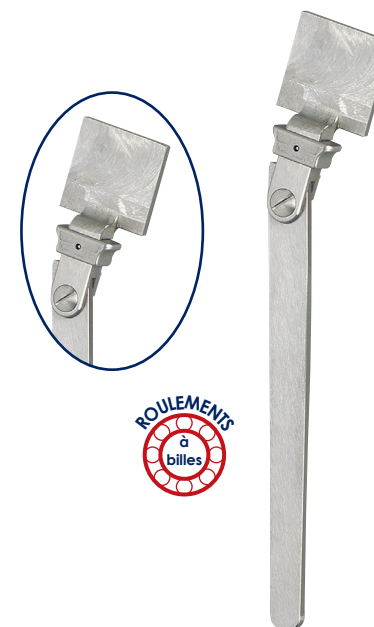

## Désignation

Pièces de hanche en acier demi-dur avec verrou coulisseau.

- |                      |                  |               |
|----------------------|------------------|---------------|
| ↪ N33 : Série forte  | Chape ép. : 6 mm | Poids : 600 g |
| ↪ N34 : Série légère | Chape ép. : 5 mm | Poids : 400 g |
| ↪ N35 : Série enfant | Chape ép. : 4 mm | Poids : 200 g |

## Destination

Pièce de hanche entrant dans la fabrication d'orthèses du membre inférieur.

## Composition

1 pièce de hanche.

## Pièces détachées

	N33	N34	N35
Verrou	N3009	N3109	N3209
Billes	V0024	V0024	V0024
Vis	V0153 V03606	V0109 V03606	V0107 V03606
Roulement	V407196	V405165	V405134
Ressort	YRC0548	YRC0548	YRC0548

## Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- Les pièces de hanche doivent être utilisées dans les limites de poids conseillées et suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié
- Chauffer la pièce au chalumeau avant de modifier sa forme (tout formage à froid exclut la garantie)

## Entretien / Stockage

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller


## Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabriquant à partir de la date d'achat du produit.

*NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.*

## Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.

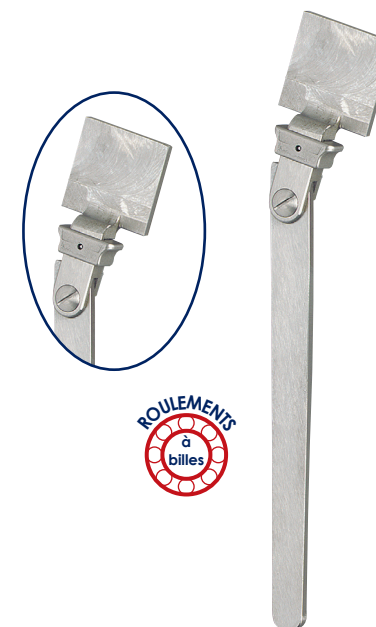

## Designation

Hip parts in semi-hardened steel.

- |                    |                           |              |                |
|--------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| N33 : Strong serie | Cross section : 25 x 6 mm | Cover : 6 mm | Weight : 600 g |
| N34 : Light serie  | Cross section : 22 x 5 mm | Cover : 5 mm | Weight : 400 g |
| N35 : Child serie  | Cross section : 20 x 4 mm | Cover : 4 mm | Weight : 200 g |

## Purpose

Knee articulation used for the manufacture of orthosis for a lower limb.