

Compatibility

Should be used for orthopaedic applications (standing/seating plastic shells...)






Spares parts

	Size 1	Sizes 2/3
Strap	X12xx-25	
Adjustment loops	X17-25	
Automatic buckles	X15-N25	X16-N25

Fitting

It is recommended to make a first fitting of the chestshoulderpad in order to precisely position the fastening point.

Restrictions one use / Precautions for use

- Machine-washable at 30° C 
- Do not :
 - Dry-clean 
 - Iron 
 - Use chlorinated agents 
 - Use in a clothes dryer 
- The chestshoulder pad must be used within the advised weight limits and in accordance with the judgement of the certified prosthetist concerning the patient to be fitted
- The maintenance of the product is decided by the prosthetist according to the type of use
- Assembly and adjustment must be performed by qualified personnel

Cleaning / Storage

- Store the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
- The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the ortho-prosthetist depending on the patient concerned

Guarantee

The guarantee is valid for six months as from the date of purchase of the product, if the product has been used in accordance with the manufacturer's instructions.

N.B.: In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in; incomplete forms cannot be dealt with.

EC markings


Groupe G2M, in its capacity as distributor, declares that all the parts conform to directive 2007/47/CE.



X36-BL2

Désignation

Plastron à bretelles en PVC renforcé et tissu confort.
Disponible en 3 tailles dans plusieurs coloris.
Livré avec sangle de 25 mm et bouclerie.

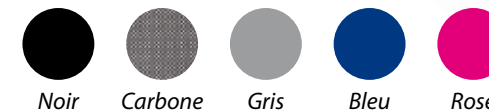

Tailles	1	2	3
A	18 cm	22 cm	25 cm
B	24 cm	29 cm	34 cm

Destination

Plastron à bretelles pour maintien de patients polyhandicapés.

Compatibilité

Compatible pour l'emploi sur coques plastiques orthopédiques (verticalisateur, corset siège...)






Pièces détachées

	Taille 1	Tailles 2/3
Sangles	X12xx-25	
Passants de réglage	X17-25	
Boucle clipsable	X15-N25	X16-N25

Mise en place

Il est préconisé de faire l'essayage avec le plastron afin de déterminer précisément les points de fixation sur la coque.

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- ☞ Ce produit est lavable en machine à 30° C 
- ☞ Il est interdit de :
 - Nettoyer à sec 
 - Repasser 
 - D'utiliser des agents chlorés 
 - De faire sécher en machine 
- ☞ Le plastron doit être utilisé suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ☞ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre d'utilisation
- ☞ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Entretien / Stockage

- ☞ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ☞ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

Garantie

La garantie est valable 6 mois pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 2007/47/CE.

Groupe G2M

168 ZA des Aubrières - 49412 SAUMUR Cedex (FRANCE)

Tél. : +33 (0)2 41 50 50 91 - Fax : +33 (0)2 41 83 05 82 - E-mail : info@groupe-g2m.com

www.groupe-g2m.com

Janton

TECHNICAL INSTRUCTIONS


X36



X36-BL2

Designation

Chestshoulder pad made of reinforced vinyl material and 3D soft garnishing. Available in 3 sizes. Various colours available. Delivered with 25 mm strap and set of loops.

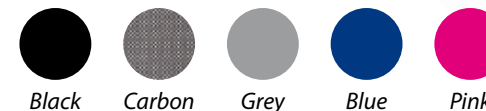

Sizes	1	2	3
A	18 cm	22 cm	25 cm
B	24 cm	29 cm	34 cm

Purpose

Chestshoulder pad for polyhandicap patients.

Chestshoulder pad