

## Systeme à cordelette REVOFITLanyard™

### En un tour de main !

La conception brevetée du système à cordelette REVOFITLanyard™ est la solution la plus confortable pour l'utilisateur. Il suffit simplement de tourner le bouton BOA® pour faire glisser le manchon dans l'emboîture tout en le guidant de façon optimale. Le REVOFITLanyard™ utilise les avantages du système mécanique BOA® pour permettre au patient de contrôler simplement la liaison avec sa prothèse en fonction de son activité.



#### EFFET DE LEVIER

L'effet de levier mécanique du système BOA® donne la possibilité à l'utilisateur de chausser sa prothèse beaucoup plus facilement que tous les autres systèmes à cordelette. Ce système est idéal pour les patients ayant des problématiques de préhension ou de faiblesse musculaire du membre supérieur.





#### SIMPLICITÉ DE MISE EN ŒUVRE

Le système à cordelette REVOFITLanyard™ est directement intégré de façon simple lors de la stratification de l'emboîture en utilisant les techniques habituelles de fabrication.



#### DOUBLE SYSTÈME BLOCAGE ET STOCKAGE

Le mécanisme BOA® permet à la fois une liaison efficace et contrôlée du manchon et également de stocker la longueur de cordelette à l'intérieur du bouton évitant ainsi d'avoir à la gérer à l'extérieur de l'emboîture.

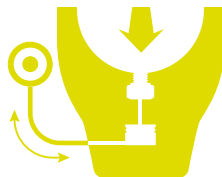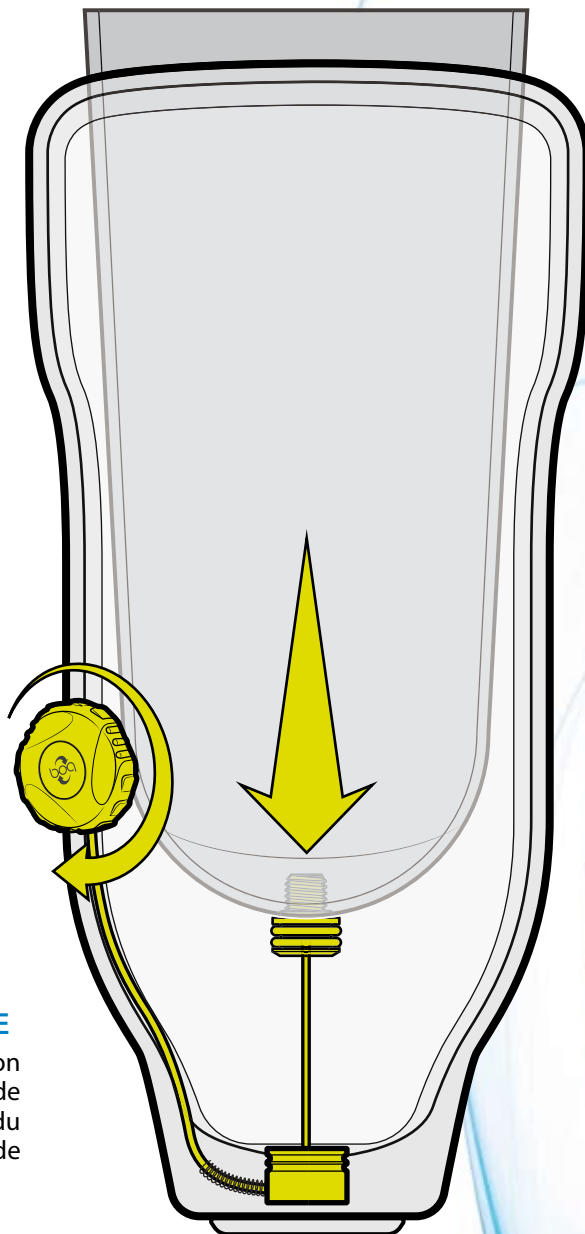


# Systeme à cordelette REVOFITLanyard™

Le nouveau standard des accrochages à cordelette !

## Pourquoi utiliser le système à cordelette REVOFITLanyard™ ?

Le système REVOFITLanyard™ a été développé spécialement pour les patients ayant des difficultés pour chausser leur prothèse. L'effet levier démultiplicateur du système REVOFITLanyard™ (x2) permet au patient de chausser sa prothèse de façon plus rapide et efficace qu'avec tous les autres systèmes à cordelette. Il autorisera notamment un chaussage parfait sans avoir à se mettre debout.

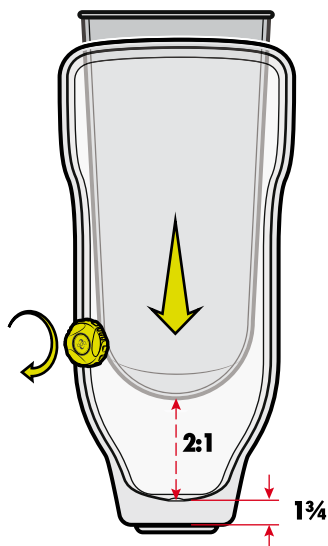


### EFFET DE LEVIER DÉMULTIPLI-CATEUR

Permet à l'utilisateur de chausser sa prothèse plus efficacement et rapidement qu'avec les autres systèmes actuellement disponibles.


### LIBERTÉ DE PLACEMENT DU BOUTON BOA®

Le bouton BOA® peut être monté n'importe où sur l'emboîture en fonction des besoins/capacités de l'utilisateur. Cela permet notamment un réglage très simple de serrage même à travers les vêtements pendant une activité.

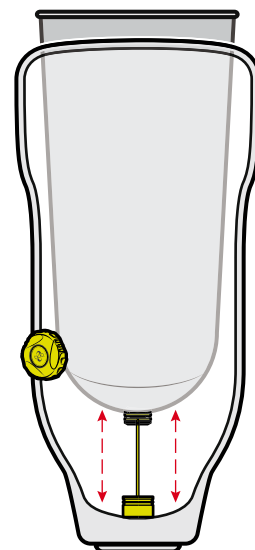


### ALIGNEMENT AUTOMATIQUE

Le système à cordelette REVOFIT Lanyard™ aligne automatiquement le manchon dans la prothèse pour un positionnement optimal en fond d'emboîture.

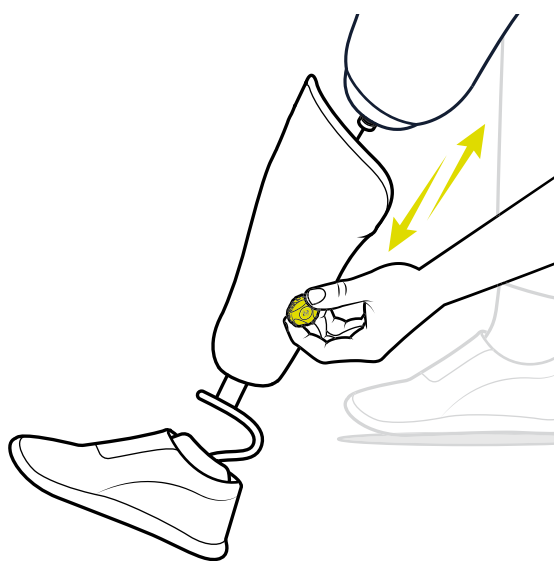

### MISE EN PLACE EN POSITION ASSISE

Le système REVOFITLanyard™ donne au patient la possibilité de chausser complètement leur prothèse, même en position assise.

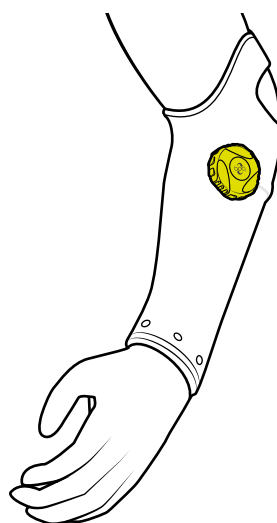

### MEMBRE SUPÉRIEUR

Le système pourra également convenir pour une utilisation en membre supérieur.