

		B21STFX	B21STMX
1	CHC screw M10 L60	V02I-1060	V24I-10
2	Lock washer Ø 10	V24I-10	V24I-10
3	Flat washer Ø 10	V20I-102219	V20Z-102219

**Restriction on use / Precautions for use**

Tightening torques (use key (Ref. : ZOC102))

Screw	Torques (Nm)
V02Z-1060	25
V02I-1060	25

- Assemble the screws using normal (Ref. : Z31-243) locking compound
- The product must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the patient concerned
- Product maintenance is subject to an assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the conditions of use
- All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel

**Cleaning / Storage**

- Stock the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
- The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the ortho-prosthetist depending on the patient concerned

**Guarantee**

The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in accordance with the manufacturer's instructions.

*N.B. In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in, incomplete forms cannot be dealt with.*

**EC markings**

Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.



**B21STFX/STMX**



**Désignation**

Adaptateur malléolaire avec pyramide - Vis M10

- B21STFX : Alliage léger Poids : 105 g
- B21STMX : Acier inoxydable Poids : 135 g


**Destination**

Élément de structure entrant dans la fabrication de prothèses endosquelettiques du membre inférieur


- B21STFX : Limite de poids : 100 kg
- B21STMX : Testé ISO 10328 P6 136 kg

**Mise en place**

Alignements théoriques

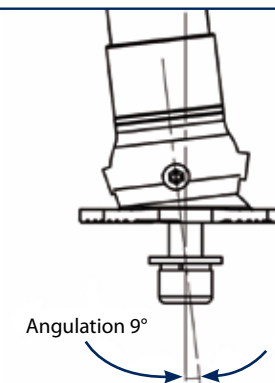

NT\_B21\_12/08/2016\_Visuels non contractuels

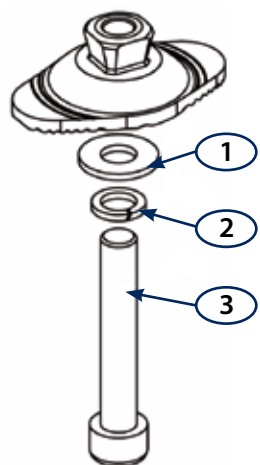

		B21STFX	B21STMX
1	Vis CHC M10 L60	V02I-1060	V24I-10
2	Rondelle grower Ø 10	V24I-10	V24I-10
3	Rondelle plate Ø 10	V20I-102219	V20Z-102219

### Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

Couple de serrage (utiliser la clé dynamométrique (Réf. : ZOC102))

Vis	Couple (Nm)
V02Z-1060	25
V02I-1060	25

- Monter les vis avec du frein filet normal (Réf. : Z31-243)
- L'adaptateur doit être utilisé dans les limites de poids conseillées et suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

### Entretien / Stockage

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

### Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

### Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.

## B21STFX/STMX



### Designation

Malleolar adapter with pyramid

- B21STFX : Light alloy Weight : 105 g
- B21STMX : Stainless steel Weight : 135 g

### Purpose

Structural element used to make endoskeletal prostheses of the lower limbs

- B21STFX : Weight limit : 100 kg
- B21STMX : Tested in accordance with ISO 10328 P6 136 kg

### Fitting

Theoretical alignments

