


## Mise en place

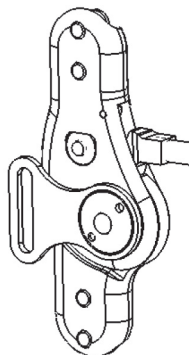


- Visser l'écrou sur la vis de pivot à l'interne de l'articulation en utilisant la clé à ergots (Réf. : ZNX1).
- Figier l'assemblage avec du frein filet Z31-243 (LOCTITE 243).

## Réglages

Pour épouser la forme de la rotule, il est possible de cintrer le passant (à froid).

## Pièces détachées

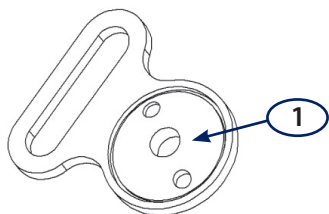

		Fileté M6	Fileté M5
1	Ecrou	V0019	V0020

## Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- Ne pas chauffer les articulations (utilisation possible du canon air chaud pour décoller les vis uniquement)
- Les passants doivent être utilisés dans les limites de poids conseillées et suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

## Entretien / Stockage

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

## Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

## Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 2007/47/CE.

Groupe G2M

168 ZA des Aubrières - 49412 SAUMUR Cedex (FRANCE)

Tél. : +33 (0)2 41 50 50 91 - Fax : +33 (0)2 41 83 05 82 - E-mail : info@groupe-g2m.com

www.groupe-g2m.com

Janton

## NOTICE TECHNIQUE D'INSTRUCTION

M3NX




Gamme Nx

## Désignation

Paire de passants de fronde inox.

- M3NX1-M5 : A = 19 mm B = 5 mm C = 21 mm D = M5 E = 2 mm  
Poids de la paire : 18 g
- M3NX2-M5 : A = 25,5 mm B = 5 mm C = 25 mm D = M5 E = 2 mm  
Poids de la paire : 27 g
- M3NX2-M6 : A = 25,5 mm B = 5 mm C = 25 mm D = M6 E = 2 mm  
Poids de la paire : 27 g
- M3NX3-M5 : A = 30,5 mm B = 5 mm C = 25 mm D = M5 E = 2 mm  
Poids de la paire : 30 g
- M3NX1-M5 : A = 30,5 mm B = 5 mm C = 25 mm D = M6 E = 2 mm  
Poids de la paire : 31 g

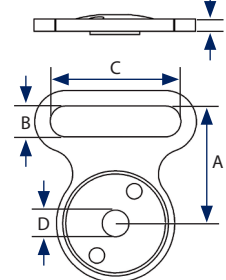

## Destination


Passant de fronde pour articulation de genou d'orthèse.

## Compatibilités

Avec les articulations de la gamme JANTON :

- M3NX1-M5 : M12 M15 M17 M18 M27 M30
- M3NX2-M5 : M08-18 M09-18 M11 M14 M26 M29
- M3NX2-M6 : M08-20 M09-20 M10 M13 M16 M25 M28
- M3NX3-M5 : M11NX M14NX
- M3NX3-M6 : M10NX M13NX

## Mise en place

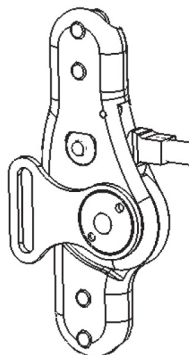


- Visser l'écrou sur la vis de pivot à l'interne de l'articulation en utilisant la clé à ergots (Réf. : ZNX1).
- Figier l'assemblage avec du frein filet Z31-243 (LOCTITE 243).

## Réglages

Pour épouser la forme de la rotule, il est possible de cintrer le passant (à froid).

## Pièces détachées

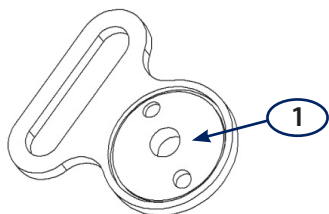

		Fileté M6	Fileté M5
1	Ecrou	V0019	V0020

## Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- Ne pas chauffer les articulations (utilisation possible du canon air chaud pour décoller les vis uniquement)
- Les passants doivent être utilisés dans les limites de poids conseillées et suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

## Entretien / Stockage

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

## Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

## Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 2007/47/CE.

**Groupe G2M**

168 ZA des Aubrières - 49412 SAUMUR Cedex (FRANCE)

Tél. : +33 (0)2 41 50 50 91 - Fax : +33 (0)2 41 83 05 82 - E-mail : info@groupe-g2m.com

www.groupe-g2m.com

**Janton**

NOTICE TECHNIQUE D'INSTRUCTION

**M3NX**




Gamme Nx

## Désignation

Paire de passants de fronde inox.

- M3NX1-M5 : A = 19 mm B = 5 mm C = 21 mm D = M5 E = 2 mm  
Poids de la paire : 18 g
- M3NX2-M5 : A = 25,5 mm B = 5 mm C = 25 mm D = M5 E = 2 mm  
Poids de la paire : 27 g
- M3NX2-M6 : A = 25,5 mm B = 5 mm C = 25 mm D = M6 E = 2 mm  
Poids de la paire : 27 g
- M3NX3-M5 : A = 30,5 mm B = 5 mm C = 25 mm D = M5 E = 2 mm  
Poids de la paire : 30 g
- M3NX1-M5 : A = 30,5 mm B = 5 mm C = 25 mm D = M6 E = 2 mm  
Poids de la paire : 31 g

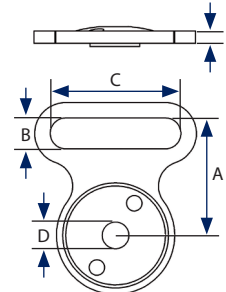

## Destination

Passant de fronde pour articulation de genou d'orthèse.

## Compatibilités

Avec les articulations de la gamme JANTON :

- M3NX1-M5 : M12 M15 M17 M18 M27 M30
- M3NX2-M5 : M08-18 M09-18 M11 M14 M26 M29
- M3NX2-M6 : M08-20 M09-20 M10 M13 M16 M25 M28
- M3NX3-M5 : M11NX M14NX
- M3NX3-M6 : M10NX M13NX